



**LUNGE ZÜRICH**

Hilft. Informiert. Wirkt.

seit 111 Jahren

## Merkmale

# Reinigung des Inhalationsgeräts und Zubehör

### Reinigungsanleitung

1. Den Vernebler nach jeder Inhalation in seine Teile zerlegen, mit warmem Wasser ausspülen und gut reinigen.
2. Die einzelnen Teile können auch in der Geschirrspülmaschine bei mindestens 50 Grad gewaschen werden. Wichtig ist, den Vernebler nicht mit verschmutztem Geschirr und ohne Spülmittel und Glanzspüler zu reinigen.
3. Schütteln Sie angesammeltes Wasser aus den einzelnen Teilen gut aus, um das Trocknen zu beschleunigen.
4. Schliessen Sie das Verneblerunterteil nochmals an den Luftschlauch an, und lassen Sie die Düse kurz durchblasen.
5. Der Luftschlauch muss trocken bleiben. Falls sich Kondenswasser bildet, lassen Sie den Luftschlauch ohne Vernebler durchblasen.
6. Die einzelnen Teile auf einer trockenen, sauberen und saugfähigen Unterlage vollständig austrocknen lassen.
7. Den Vernebler in ein sauberes, fusselfreies Tuch einwickeln und an einem trockenen Ort aufbewahren.
8. Bei regelmässigem Gebrauch muss der Vernebler einmal jährlich ersetzt werden.


### Desinfektion

Grundsätzlich sollte der Vernebler einmal wöchentlich desinfiziert werden. Bei Patienten mit Cystischer Fibrose oder bei Infekten sollte der Vernebler vermehrt, nämlich nach jeder Inhalation desinfiziert werden.

1. Kochen Sie den Vernebler mindestens 10 bis 15 Minuten in destilliertem Wasser aus.
2. Sie können auch ein handelsübliches, thermisches Desinfektionsgerät (z.B. für Babyflaschen) nutzen, Desinfektionszeit ca. 15 Minuten.

### Aufbewahrungshinweis für den Inhalationsapparat

Schützen Sie den Inhalationsapparat mit einem Tuch vor Staub und bewahren Sie ihn an einem trockenen Ort auf.

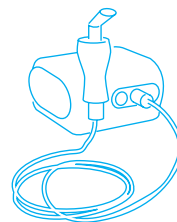

März 2018

LUNGE ZÜRICH

Pfingstweidstrasse 10, 8005 Zürich  
T 0800 07 08 09, F 044 268 20 20, [beratung@lunge-zuerich.ch](mailto:beratung@lunge-zuerich.ch)  
[www.lunge-zuerich.ch](http://www.lunge-zuerich.ch), Spendenkonto: 80-1535-7

