

---

# Merksblatt

## Umgang mit Sauerstoffkonzentratoren

Bitte beachten Sie beim Umgang mit dem Sauerstoffkonzentratoren folgende Hinweise:

### Reinigung des Sauerstoffkonzentratoren

Das Gerät muss regelmässig mit einem leicht feuchten Lappen gereinigt werden. Für die Reinigung des Konzentratoren dürfen keine entflammbaren Materialien wie Öle oder Fette verwendet werden.

### Materialwechsel

Einmal pro Monat muss beim Sauerstoffkonzentratoren ein Materialwechsel durchgeführt werden. Dabei gilt es folgende Punkte zu beachten:

- Den Grobstaub-Filter mit Wasser ausspülen und trocknen lassen, einen trockenen Ersatzfilter einsetzen.
- Beim Konzentratorenmodell der Firma Kröber muss ein neuer Filter eingesetzt werden, der alte Filter kann entsorgt werden.
- Die Sauerstoffbrille auswechseln.

### Sicherheitsbestimmungen

Ist der Sauerstoffkonzentratoren in Betrieb, dürfen sich folgende Gegenstände nicht in der Nähe des Geräts oder des Patienten befinden:

- offenes Feuer
- brennende Zigaretten
- brennende Kerzen oder Rechaud-Kerzen
- Gaskochherd
- usw.

Ausserdem darf der Konzentratoren nicht im Badezimmer betrieben werden.


### Trockene Nasenschleimhäute

Trockene Schleimhäute äussern sich dadurch, dass sich die Nase verstopft oder schmerzhaft anfühlt. Auch Nasenbluten deutet auf trockene Schleimhäute hin. Bei der Sauerstofftherapie können diese Beschwerden vermehrt auftreten. In diesem Fall soll eine befeuchtende, fettfreie Nasensalbe verwendet werden. Sollte dies nicht ausreichen, kann in speziellen Fällen auch eine Befeuchterflasche für den Konzentratoren in den Einsatz kommen.

### Befeuchterflasche

Bei der Benutzung der Befeuchterflasche gilt es folgende Hinweise zu beachten:

- Nur destilliertes respektive demineralisiertes Wasser verwenden. (Dieses Wasser wird beispielsweise für Bügeleisen verwendet und ist im Detailhandel erhältlich.)
- Die Befeuchterflasche höchstens bis zur Mitte auffüllen, sorgfältig zuschrauben und darauf achten, dass der Verschluss nicht verkantet.
- Das Wasser in der Flasche täglich wechseln.
- Die Flasche täglich mit Spülmittel reinigen. Einmal pro Woche zudem für 30 Minuten in Essigwasser (Verhältnis 1:10) einlegen und anschliessend gründlich ausspülen.

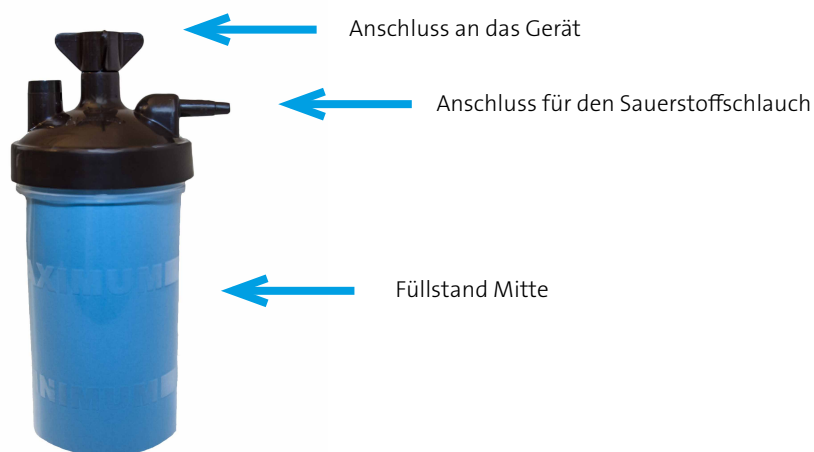

Februar 2019

LUNGE ZÜRICH

Pfingstweidstrasse 10, 8005 Zürich  
T 0800 07 08 09, F 044 268 20 20, [beratung@lunge-zuerich.ch](mailto:beratung@lunge-zuerich.ch)  
[www.lunge-zuerich.ch](http://www.lunge-zuerich.ch), Spendenkonto: 80-1535-7

